



4輪組立手順書（小型・中型）

・梱包時の全内容物

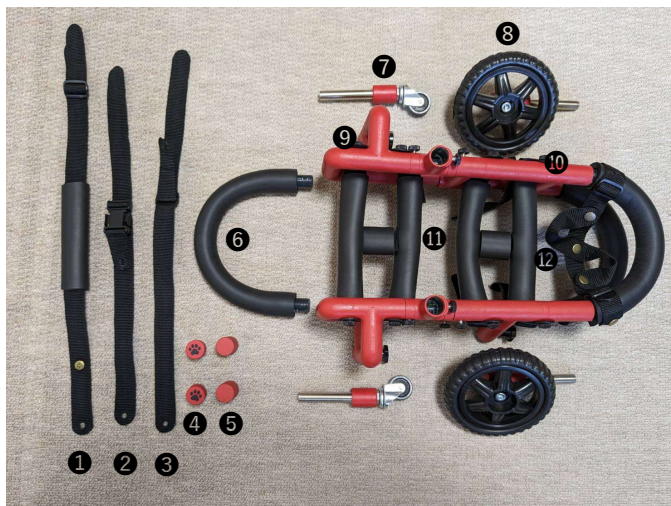

- ① 胸当てベルト
- ② 胴回りベルト上（バックル付き）
- ③ 胴回りベルト下
- ④ フレームキャップ下
- ⑤ フレームキャップ上
- ⑥ アーム
- ⑦ 前輪タイヤ
- ⑧ 後輪タイヤ
- ⑨ 4輪前方パーツ
- ⑩ 本体
- ⑪ 前・後足用ベルト
- ⑫ 足乗せベルト
- ⑬ ノブボルト
- ⑭ 化粧ビス

4輪時で使用

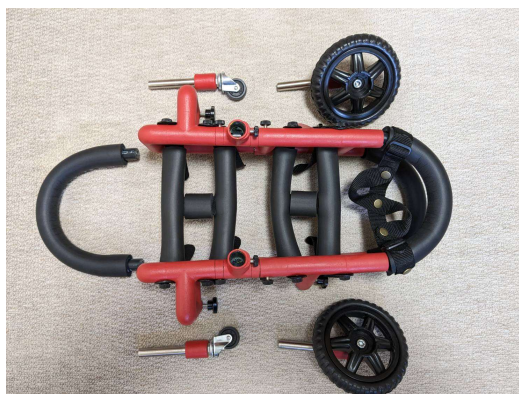

2輪時で使用（保管をお願いします）




ベルトは取り付けていますので前輪・後輪・アームを取り付けるだけです。

(1) 本体と4輪前方パーツに前輪と後輪を取り付けます。

- ・車輪を取り付けるフレームについているノブボルト⑬を緩め、車輪のステンレス部分を差し込み
- ⑬ノブボルトを締めて固定します。車輪はステンレス部分に赤色がついているのが右。青色は左です。
- ステンレス部分の色面（赤・青）をノブボルトの位置に合わせて取り付けてください。



赤色は右
青色は左

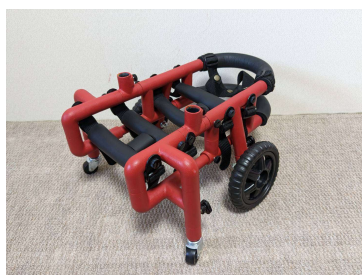

(2)アームを取り付けます

- ・アーム⑥を取り付ける穴の後ろにある化粧ビス⑭を緩め、ねじ穴を合わせアームを差し込みます。両方しっかりと差し込みが完了したら、化粧ビス⑭をしっかりと締めます。
- (注) 穴の位置を確認し合わせてください。



(3)完成です



- * 本体後方のU字フレームについているベルトは足乗せベルト⑫です。取り外しが可能です。お散歩で足を引きずるようであれば乗せてあげてください。