


## 2 輪⇒ 4 輪への改造手順書（超小型）




(1)保管していただいております、下記部品（ベルト、フレーム、前輪タイヤ）をご準備ください。

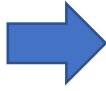

- ⑥前輪タイヤ
- ⑧4輪前方パーツ
- ⑩前足入れベルト




⑫ノブボルト

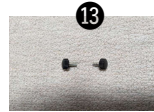

⑬化粧ビス

(2)①②③④箇所の化粧ビス⑬を外し、図1のベルト、キャップを外します

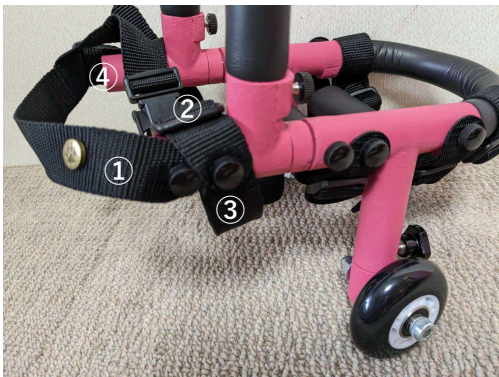


- ①胸当てベルト
- ②胴回りベルト上（バックル付き）
- ③胴回りベルト下
- ④フレームキャップ下




⑨本体

(3)保管していた4輪前方パーツ⑧と前輪タイヤ⑥ヲ使い、下記のように組み立てます。

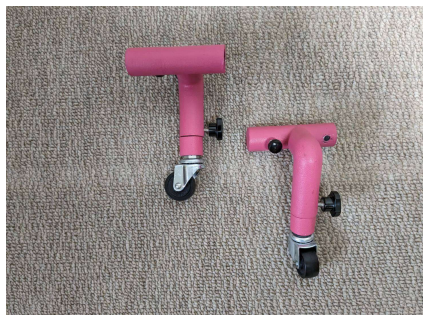

2輪のベルト、キャップを外した本体⑨に上図の前輪モジュールを左右に差し込み、穴の位置を合わせ\*1の箇所(左右)を化粧ビス⑬で留めます。

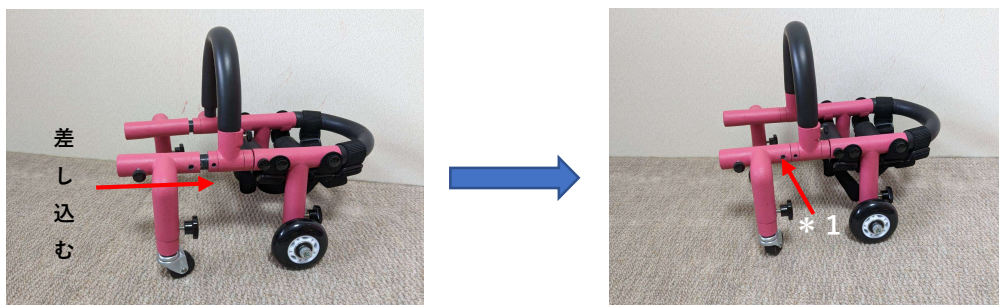

(4)前足を入れるベルトを取り付ける。

前足入れベルト⑩をフレームの外側から図のように左右取り付け、化粧ビス⑬で留める。



(5)完成

